



JET tipo

Vartotojo vadovas

Bendrosios gairės	4
Klausos aparato apžvalga.....	5
Bendra informacija apie klausos aparatų saugą ir naudojimą.....	11
Akumuliatoriaus įdėjimas.....	15
Klausos aparato įjungimas ir išjungimas.....	17
Klausos aparato įdėjimas ir išėmimas.....	18
Prisitaikymas prie klausos aparato ir naudingi patarimai.....	19
Klausos aparato ir ausų įdėklų priežiūra	20
Klausos aparato priežiūra	22
Priedai / valymo sprendimai	22
Problemų sprendimas.....	23
Turinys.....	26
Pakuotė ir saugojimas.....	27
Garantija.....	28
Pretenzijos.....	29
Išmetimas.....	30



Visoseisės saugomos. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, atkurama ar platinama jokia forma be aiškaus raštiško Aurica Ltd sutikimo.

Aurica LTD yra EN ISO 13485 sertifikuota įmonė klausos sprendimų kūrimo, projektavimo, gamybos ir aptarnavimo srityje.

Šis naudojimo vadovas, įskaitant specifikacijas, yra „Aurica Jet“ klausos aparato vartotojo vadovas.



Prieš naudodami Aurica Jet klausos aparatą, perskaitykite šį naudojimo vadovą. Šiam naudojimui vadove pateikiama klausos aparato Aurica Jet prietaiso aprašymas, veikimo principas, techninės specifikacijos ir naudojimo instrukcijos.

Saugos ženklai



Žr. Vartotojo vadovą / bukletą



Bendras saugos ženklas



Bendras draudžiantis ženklas



Bendras įspėjamas ženklas



Europos galioti atstovas



Gamintojas

DC įtampa



Apsauga nuo elektros smūgio, taikoma B daliai



Elektros atliekų neišmeskite



Katalogo numeris



Serijos Nr.




Pagaminimo data

IP32

IP apsauga:
Vanduo, krentantis kampu (iki 15°)
Apsauga nuo pašalinių medžiagų 2,5 mm



Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą

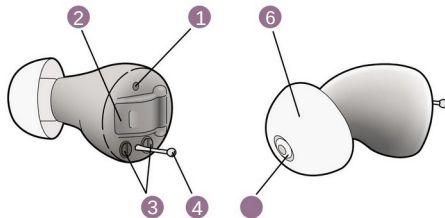


1 pav

2 pav

- 1- mikrofonas;
- 2- Baterijų skyrius;
- 3- Garso režimai ;
- 4- Išėmimo rankena (pasirinktinai); 5- vaško apsauga; 6 - Ausklė.

1 Garso režimai yra neprivalomi Jet 1 modelyje. Garso režimų kiekis gali būti skirtingas pagal modelį.

Jet CIC klausos aparatų su dviem mikrofonais modifikacijos
(programuojamas trimiris): Jet D4.

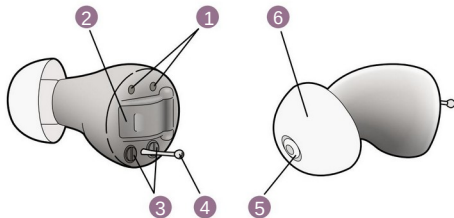


3 pav

4 pav

- 1 – Mikrofonai;
- 2 – Baterijų skyrius;
- 3 – Garso režimai;
- 4 – Išėjimo rankena (pasirinktinai);
- 5 – vaško apsauga;
- 6 – Ausų įdėklas.

Jet ITC klausos aparatų su vienu mikrofonu modifikacijos
(programuojamas trimiris): Jet 1P, Jet 2P, Jet 4P.

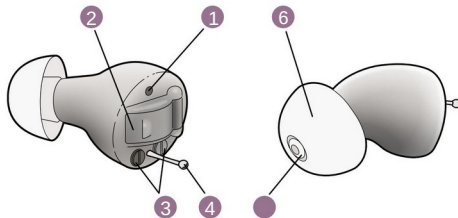


5 pav

6 pav

- 1- mikrofonas;
- 2 – Baterijų skyrius;
- 3 – Garso režimai;
- 4 – Išėjimo rankena (pasirinktinai);
- 5 – vaško apsauga;
- 6 – Ausų įdėklas.

2 Jet 1P modeliui režimai yra neprivalomi. Režimų kiekis skiriasi nuo modelio.

Jet ITC klausos aparatų su dviem mikrofonais modifikacijos
(programuojamas trimiris): Jet D4P.

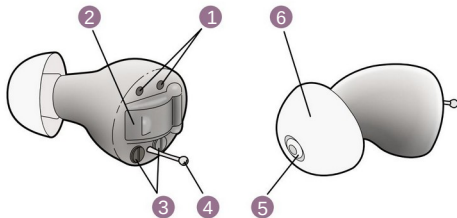


7 pav

8 pav

- 1 – Mikrofonai;
- 2 – Baterijų skyrius;
- 3 – Garso režimai;
- 4 – Išėmimo rankena (pasirinktinai);
- 5 – vaško apsauga;
- 6 – Ausų įdėklas.

Jet CIC klausos aparatų su dviem mikrofonais modifikacijos
(programuojamas): Jet D8, Jet D16.

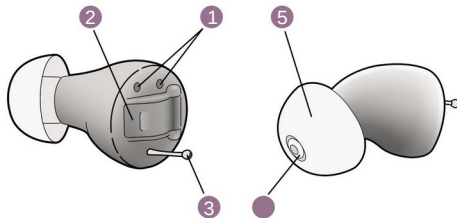


9 pav

10 pav

- 1 – mikrofonai;
- 2 - Baterijų skyrius;
- 3 – Išėmimo rankena (pasirinktinai);
- 4 - Vaško apsauga;
- 5 - Ausų įdėklas.

Jet ITKlausos aparatų su dviem mikrofonais modifikacijos
(programuojamas): Jet D8P, J616P.

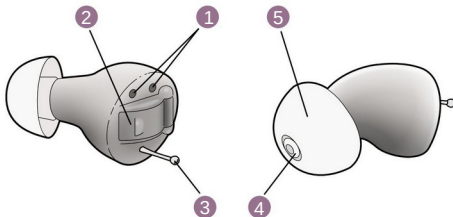

11 pav

12 pav

- 1 – mikrofoniai;
- 2 - Baterijų skyrius;
- 3— Išėmimo rankena (pasirinktinai);
- 4- Vaško apsauga;
- 5 - Ausies dėklas.

Oro srovės laidumo ausyje klausos aparatai yra skirti kompensuoti lengvą ar vidutinio sunkumo klausos praradimą. Jetklausos aparatai yra pagrįsti pažangiausiomis technologijomis ir pirmaujantių pasaulio gamintojų komponentais, o tai garantuoja puikią garso kokybę.

Klausos aparatai neatkuria normalios klausos ir negali užkirsti kelio tolesniam klausos sutrikimui, atsirandančiam dėl organinių sąlygų.

Prieš pradėdami naudotis klausos aparatu, atidžiai perskaitykite šias saugos taisykles ir kitą informaciją, pateiktą šiame vadove.



Klausos aparatų saugos taisyklės



Įspėjimas! Toliau pateiktų klausos aparatų saugos taisyklių pažeidimas gali sukelti sužalojimus ir rimtą sveikatos pablogėjimą.

- Klausos aparatą naudokite griežtai pagal šį vadovą.
- Klausos aparato montavimą ir remontą turi atlikti tik specialistai.
- Smūgis į ausį, kai joje yra klausos aparatas, gali rimtai pakenkti klausai. Nenaudokite klausos aparato užsiimdami kontaktiniu sportu.
- Niekada neikiškite baterijų į burną, nes įsagalima lengvai praryti.
- Baterijas laikykite atskirai nuo vaistų. Įsagalima lengvai supainioti su tabletėmis.
- Jei prarijote bateriją ar klausos aparatą, nedelsdami kreipkitės gydytoją.
- Jei klausos aparatas ar ausies dėklas sukelia niežulį, diskomfortą, alerginę reakciją ar išsiskyras iš ausies, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Būkite atsargūs dėl nutukėjusių baterijų. Akumuliatoriaus skystis kenkia sveikatai ir gali sukelti odos dirginimą, alerginę reakciją, taip pat apsinuodijimą maistu.
- Išsiimkite klausos aparatą atliekant medicininius tyrimus ir procedūras (X-spindulių tyrimas, kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija ir kt.).

- Netraukite staigiai iš ausies klausos aparato ausies įdėklo, nes gali plyšti ausies būgnelis. Daugiau informacijos apie klausos aparato išėmimo iš ausies procedūrą rasite skyriuje Klausos aparato įdėjimas ir išėmimas.

- Prieš miegą išimkite klausos aparatą.
- Neleiskite kitiems asmenims naudotis jūsų klausos aparatu, nes jis yra pritaikytas jūsų klausos praradimui ir gali negrįžtamai pakenkti kito asmens klausai.
- Niekada nemėginkite įkrauti cinko-oro baterijų, naudojamų klausos aparate.



Klausos aparatų saugos taisyklės



Įspėjimas! Pažeidus toliau nurodytas klausos aparato naudojimo taisykles, klausos aparatas gali būti sugadintas ir garantija gali būti negaliojanti.

- Klausos aparatą naudokite griežtai pagal šį vadovą.
- Saugokite klausos aparatą nuo mechaninio poveikio.
- Jei klausos aparatą paveikė per didelė drėgmė, išimkite bateriją ir išdžiovinkite naudodami specialius priedus, tokius kaip džiovintuvai ir džiovinimo indai su drėgmę sugeriačiais elementais. Nedžiovinkite klausos aparato aukštoje temperatūroje (naudodami plaukų džiovintuvą, mikrobangų krosnelę, viryklę ir pan.).
- Saugokite savo klausos aparatą nuo per didelės drėgmės (lietaus, pirties, dušo, šiltnamio ir pan.). Nenaudokite klausos aparato plaukdamas, nardydami ar užsiimdami kitomis vandens sporto šakomis. Nėra rekomenduojama į vandenį ar kitus skysčius.
- Prieš tepdami plaukų ar kūno priežiūros priemones, taip pat įvairius aerozolius (plaukų laką, kūno kremą ir pan.), nusiimkite klausos aparatą. Jei klausos aparatas buvo veikiamas tokių gaminių, prieštolėsnį naudojimą jį reikia išdžiovinti.

- Nelaikykite klausos aparato aukštoje temperatūroje. Venkitetiesioginių saulės spindulių poveikio. Nepalikite klausos aparato prastai vėdinamose vietose, kuriose oro temperatūra aukšta, arba šalia radiatorių ir kitų šildymo prietaisų.
- Naudokite tik tinkamo dydžio cinko-oro baterijas, skirtas klausos aparatams. Nenaudokite kitų tipų baterijų (mygtukų baterijų ir kt.), taip pat sugedusių (oksiduotų, nesandarių) baterijų.
- Akumuliatorių dėkite tik į akumuliatoriaus skyrių. Nedėkite baterijos į klausos aparato korpusą. Išsamesnės informacijos apie akumuliatoriaus įdėjimo procedūrą rasite šio vadovo skyriuje Akumuliatoriaus įdėjimas.
- Jei klausos aparatas nenaudojamas ilgą laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte korozijos.

- Klausos aparato montavimą ir remontą turi atlikti tik specialistai.
- Išsiimkite klausos aparatą atliekant medicininius tyrimus ir procedūras (rentgeno tyrimą, kompiuterinę tomografiją, magnetinio rezonanso tomografiją ir kt.).
- Niekada neikiškite klausos aparato valymo įrankių į garso ir mikrofono lizdus.
- Prieš miegą išimkite klausos aparatą.
- Klausos aparatus, atsargines dalis, baterijas ir kitus priedus reikia laikyti apsauginiame dėkle, vaikams, naminiams gyvūnėliams ir psichikos sutrikimų turintiems žmonėms nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada nebandykite įkrauti cinko-oro baterijų, naudojamų klausos aparate.
- Nenaudoti aplinkoje, kurioje gausu deguonies.
- Nenaudokite degių medžiagų, įskaitant degius anestetikus.
- Nekeiskite klausos aparato konstrukcijos.



Naudojimo indikacijos

Oro laidumo klausos aparatas yra nešiojamas garšą stiprinantis elektroninis prietaisas, skirtas kompensuoti susilpnėjusią klausą. Klausos aparatai yra kelių stiprinimo / išėjimo lygių, tinkamų klausos praradimui nuo lengvo iki vidutinio. Klausos aparatą turi pritaikyti klausos priežiūros specialistas, atsižvelgdamas į paciento klausos praradimą.



Kontraindikacijos

- Aktyvaus drenažo iš ausies istorija per pastarąsias 90 dienų.
- Staigus arba greitai progresuojantis klausos praradimas praėjus 90 dienų.
- Vienašalis klausos praradimas, kuris prasidėjo staiga arba neseniai 90 dienų.
- Ūmus arba lėtinis galvos svaigimas.
- Audiometrinis oro ir kaulų tarpas ne mažesnis kaip 15 dB esant 500 Hz (Herc), 1000 Hz ir 2000 Hz.
- Matomi žymaus ausų sieros susikaupimo ar svetimkūnio požymiai ausies kanale.
- Skausmas ar diskomfortas ausyje.
- Matoma įgimta ar trauminė ausies deformacija.
- Vestibulinio aparato sutrikimas.
- Ūminis uždegimas ir ūminė lėtinių uždegiminių procesų fazė išorinė ir vidurinė ausis.
- Pirmieji mėnesiai po smegenų meningito ir klausos gerinimo operacijų.
- Alergija ausų įdėjimams.



Įtaka vairavimui

Jūsų klausos aparatas gali nustoti veikti be įspėjimo. Visada atminti, kad vairuodami, ypač tais atvejais, kai turite pasikliauti įspėjimaisiais signalais.



Paskirtis

Klausos aparatas skirtas vienam pacientui naudoti individualiai; tai medicinos prietaisas, naudojamas gydymo įstaigose imamuose tik pagal gydytojo receptą.




Įspėjimas! Klausos aparatą reikia montuoti ir naudoti esant maksimaliam garso slėgio lygiui ypač atsargiai, nes gali kilti pavojus, kad klausos aparato naudotojas gali pakenkti klausai.




Įspėjimas! Naudokite tik tinkamo dydžio cinko-oro baterijas, skirtas klausos aparatams. Nenaudokite kitų tipų baterijų (mygtukų baterijų ir kt.), taip pat sugedusių (oksiduotų, nesandarių) baterijų. Pažeidusią klausos aparato naudojimo taisyklę, klausos aparatas gali būti sugadintas ir negalioja garantija.

Norėdami įdėti bateriją:


1. Laikykite klausos aparatą už jo korpuso ir švelniai atidarykite akumulatoriaus skyrių, nedėdamidaug pastangų (13 pav.).
2. Nuimkite apsauginį skirtuką nuo naujos baterijos ir palaukite minutę, kol baterija sugers deguonį (14 pav.).
3. Vienoje rankoje laikykite klausos aparatą, o kitoje – bateriją ir pritraukite bateriją prie klausos aparato (15 pav.).
4. Įdėkite bateriją į akumulatoriaus skyrių, laikydamiesi poliškumo (16 pav.).
5. Per daug nesistengdami uždarykite baterijos dureles, kol išgirsite spragtelėjimą (17 pav.). Saugiai uždarius akumulatoriaus dangtelį, klausos aparatas įsijungia.

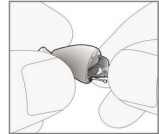


13 pav

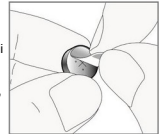


14 pav

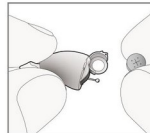

15 pav

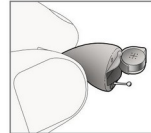

16 pav

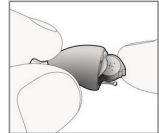

17 pav

Pastaba: naudokite magnetinį šepetėlį, kad išimtumėte išsikrovusią bateriją.



Įspėjimas! Bateriją dėkite tik į akumuliatoriaus skyrių. Nedėkite baterijos į klausos aparato korpusą. Jei baterija įdėta neteisingai ir durelės visiškai neužsidaro, pakeiskite baterijos padėtį. Pažeidus klausos aparatą dėl šios naudojimo taisyklės pažeidimo, klausos aparato garantija negalioja.



Niekada neuždarinėkite akumuliatoriaus skyriaus durelių jėga!

Mažesnis garsumas ir garso kokybė, taip pat spontanišką klausos aparato išsijungimas rodo, kad akumuliatorius išsikrovęs.

Mano klausos aparatas naudoja tokio tipo baterijas
(užpildo klausos priežiūros specialistas):

Pastabos	Baterijos Tipas
	675 dydžio baterija (mėlyna apsauginė juostelė)
	13 dydžio baterija (oranžinė apsauginė juostelė)
	312 dydžio baterija (rudas apsauginis skirtukas)
	10 dydžio baterija (geltona apsauginė juostelė)

Baterijos išmetimas



Įspėjimas! Siekiant išvengti aplinkos taršos, visas vartotojų baterijas (tiek pakartotinai įkraunamas, tiek neįkraunamas) reikia tinkamai išmesti. Vartotojų baterijų (tiek įkraunamų, tiek neįkraunamų) negalima išmesti į buitines šiukšles. Naudotas baterijas prašome pristatyti į specializuotą išdavimo vietą; tai padės išsaugoti mūsų planetos aplinką.

Klausos aparato įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti klausos aparatą, įdėkite bateriją, įsitikinkite, kad ji tinkamai įdėta ir visiškai uždarykite baterijos dureles (žr. vadovo skyrių „Baterijos įdėjimas“) (18 pav.).


Norėdami išjungti klausos aparatą, šiek tiek atidarykite baterijos dureles (19 pav.).

Klausos aparatas įjungtas



18 pav.

Klausos aparatas išjungtas

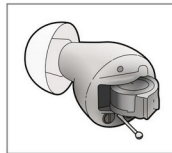


19 pav.



Prieš įdėdami klausos aparatą į ausies kanalą, įsitikinkite, kad akumuliatorius įdėtas tinkamai, o baterijos dangtelis yra tvirtai uždarytas.

Norėdami įdėti klausos aparatą:

1. Nykščiu ir smiliumi laikykite klausos aparato korpusą už korpuso krašto (20 pav.).
2. Pritraukite klausos aparatą prie ausies kanalo, įkiškite jį ir piršto galiuku švelniai paspauskite klausos aparatą į vietą (21 pav.).

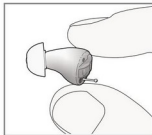

20 pav

Norėdami išimti klausos aparatą:

1. Nykščiu ir smiliumi laikykite klausos aparato apvalkalą už krašto ir švelniai jį sukdami nuimkite nuo ausies (22 pav.).
2. Klausos aparatams su nuėmimo rankena: laikykite už išėmimo rankenos ir švelniai traukdami nuimkite klausos aparatą nuo ausies (23 pav.).



21 pav



22 pav



23 pav

- Pradėjus naudotis klausos aparatu, iš pradžių gali atsirasti neįprastų pojūčių ausyje, nesusijęs kanale yra svetimkūnis; garsai taip pat gali jaustis skirtingai. Jums gali prireikti šiek tiek laiko priprasti prie naujų pojūčių. Geriausias būdas priprasti prie klausos aparato – tai daryti palaipsniui, kasdien ilginant jo nešiojimo laiką.
- Laikas, kurioreikia priprasti prie klausos aparato, priklauso nuo specifinių jūsų organizmo savybių ir klausos praradimo laipsnio.
- Pirmą kartą pradėjus naudotis klausos aparatu, ausyje gali būti nedidelis dirginimas, nesusijęs kanale yra svetimkūnis. Tokiu atveju būtina pasikonsultuoti su specialistu.
- Jei atsiranda niežulys, diskomfortas, alerginės reakcijos, gausus prakaitavimas, vaško perteklius, išskyras iš ausies, nedelsdami kreipkitės į specialistą.
- Klausos aparatas įdedamas teisingai, jei jis tvirtai priglunda prie ausies ir jo nejaučiate.
- Pradėjus jausti diskomfortą, būtina sumažinti jo garsumą arba padaryti nedidelę pertraukėlę, išjungiant klausos aparatą.
- Norėdami žiūrėti televizorių, nustatykite įprastą televizoriaus garsumą. Jeigu negirdite gerai garsų, padidinkite klausos aparato garsumą naudodami garsumo valdiklį. Atminkite, kad per daug padidinus garsą galite greitai pavargti ir pabloginti klausą.
- Nesivaržykite daryti paklausti savo pašnekovo, jei jums sunku išgirsti kai kuriuos žodžius, ypač triukšmingoje aplinkoje.




Dėmesio! Kad klausos aparatas veiktų patikimai, būtina tinkama priežiūra.

Klausos aparato priežiūra

Kasdienė klausos aparato priežiūrai reguliari priežiūra gali žymiai pailginti jo tarnavimo laiką ir užtikrinti efektyvų jo veikimą.

Laikykitės savo klausos aparatą švarų. Reguliariai valykite klausos aparatą specialiu šepetėliu ir nuvalykite minkštu skudurėliu (24 pav.).

Išvalykite ausis nuo ausų vaško, nestai gali pabloginti darbą ir sugesti klausos aparatas.

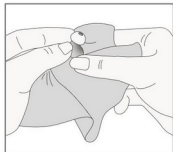

24 pav



Įspėjimas! Niekada neplaukite klausos aparato vandeniu ar buitiniiais valikliais, nepurškite aerozolių ant klausos aparato ar šalia jo, nestai gali sugesti ir netekti garantijos. Klausos aparatą leidžiama valyti specialiu skysčiu, skirtu klausos aparatams valyti, užtepus nedidelį kiekį jo ant minkšto audinio ar vatos diskelio.



Įspėjimas! Nedžiovinkite klausos aparato aukštoje temperatūroje (naudodami plaukų džiovintuvą, mikrobangų krosnelę, viryklę ir pan.).

Jei klausos aparatas nenaudojamas ilgą laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte korozijos.


Klausos aparatai, atsarginės dalys, baterijos ir kiti priedai turi būti laikomi apsauginiame dėkle, vaikams, gyvūnams ir psichikos sutrikimų turintiems žmonėms nepasiekiamoje vietoje.

Ausų įdėklų priežiūra

Pastaba: prieš kiekvieną naudojimą įsitinkinkite, kad ausų įdėklas yra švarus.

Norėdami tinkamai išvalyti ausų įdėklą:

1. Viena ranka laikykite klausos aparatą už korpuso, o kita ranka – už ausies įdėklo.
2. Atsargiai, nedarydami staigių judesių nedėdami per daug pastangų, atskirkite ausų įdėklą nuo klausos aparato korpuso (25 pav.).
3. Ausų įdėklą kruopščiai nuplaukite šiltame muiluotame vandenyje arba 15-30 minučių įdėkite į specialų tirpalą su šlapiam ausų įdėklų valymui skirta tablete. Tikslų laiką, kurio reikia ausų įdėklui ir garso vamzdeliui išvalyti, rasite konkrečios valymo priemonės naudojimo instrukcijoje (26 pav.).

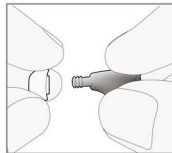

25 pav



26 pav



Įspėjimas! Ausų įdėklų valymui nenaudokite alkoholio tirpalų. Nenaudokite klausos aparato valymo skysčio.



Reguliariai keiskite vaško apsaugą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vaško apsaugos keitimo procedūrą, žr. vaško apsaugos vadovą ir kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Klausos aparato priežiūra yra būtina norint užtikrinti nuolatinį klausos aparato veikimą ir išvengti brangaus jo remonto. Garantiniu laikotarpiu teikiama nemokama priežiūra (žr. skyrių *Garantija*).

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite susisiekti su klausos aparatų centru, kuriame įsigijote klausos aparatą.

Dėl paslaugų teikimo sąlygų pasibaigus garantiniam laikotarpiui teiraukitės klausos priežiūros centro, kuriame įsigijote klausos aparatą.

Pretenzijas dėl naudotų prekių ir priedų kokybės priima organizacija, pardavusi šias prekes ir priedus per garantinį laikotarpį, paraiška, nurodant trūkumus, kartu sukasos kvitu arba pardavimo kvitu ir pakuotė konservuota.



Įspėjimas! Serifikate pateiktoje informacijoje pateikiamas bendras galimų gaminio techninių savybių aprašymas. Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas ir pakuotėstūrinį bei šankstinio įspėjimo. Žodis „neprivaloma“ tekste vartojamas nurodant papildomas klausos aparato funkcijas.

Priedai / valymo sprendimai

- Valymo rinkinys (minkšta šluostė, valymo šepetys);
- Indelis klausos aparatui džiovininti;
- Klausos aparato džiovinimui skirtos tabletės;
- Talpykla šlapiam ausų įdėklų valymui;
- Tabletės šlapiam ausų įdėklų valymui;
- Ausų įdėklai;
- Vaško apsauga;
- Cinko-oro baterijos, 1,4 V (pažymėtos spalva): Geltona apsauginė juostelė-10; Oranžinė apsauginė juostelė-13; Ruda apsauginis skirtukas-312; Mėlyna apsauginė juostelė-675.



Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie klausos aparatų priedus ir valymo sprendimus (ir jų kainas), kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Klausos aparatas nėra dirbantis	Baterija netinkamai įdėta į akumuliatoriaus skyrių	Tinkamai įdėkite bateriją į akumuliatoriaus skyrių (žr. Akumuliatoriaus skyrių)
	Akumuliatoriaus dangtelis nėra tinkamai uždarytas	Tinkamai uždarykite akumuliatoriaus dureles
	Baterija išsikrovusi	Pakeiskite bateriją
	Akumuliatorius nešvarus	Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus skyriaus kontaktai nėra nešvarūs, atsargiai pašalinkite nešvarumus klausos aparato valymo šepetėlių, jei reikia, kreipkitės specialistą
	Ausų įdėklas užblokuotas	Nuvalykite ausų įdėklą (žr. Rūpinimasis savo klausos Pagalbinės priemonės ir ausų įdėklai)
	Klausos aparatas kontaktavo su vandeniu	Įdėkite klausos aparatą į specialų indą su nusausinimo elementais arba į specialų džiovituvą

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Garsas per tylus, pulsuojantis arba su pertrūkiais	Garsumo valdymas neveikia	Patikrinkite garsumo valdiklį, kreipkitės specialistą, jei jis neveikia
	Baterija išsikrovusi	Pakeiskite bateriją
	Ausų įdėklas užblokuotas	Nuvalykite ausų įdėklą (žr. Rūpinimasis savo klausos pagalbinės priemonės ausų įdėklais)
	Klausos aparatas kontaktavo su vandeniu	Įdėkite klausos aparatą į specialų indą sunašausinimo elementais arba į specialų džiovintuvą
	Vaško apsauga užblokuota	Pakeiskite vaško apsaugą
	Jūsų klausapablogėjo	Kreipkitės į specialistą

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Švilpimo triukšmas	Klausos aparatas nepakankamai tvirtai priglunda prie ausies kanalo	Išimkite klausos aparatą ir vėl įkiškite į ausies kanalą (žr. Klausos aparato pašalinimas)
	Vaško apsauga užblokuota	Pakeiskite vaško apsaugą
	Ausų įdėklas deformuotas	Pakeiskite ausų įdėklą
	Ausies kanale susikaupė ausų sieros	Norėdami pašalinti, kreipkitės į gydytoją ausų vaškas
	Ausų įdėklas užblokuotas	Nuvalykite ausų įdėklą (žr. Rūpinimasis savo klausos pagalbinės priemonės ir ausų įdėklais)

Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis
1	Klausos aparatas	
2	Baterijos	
3	Ausų įdėklai	
4	Vartotojo vadovas	
5	Įdėklas	
6	Dėžutė	
7	Valymo šepetys su magnetu	

Rinkinį sudaro _____ daiktų.

Kliento parašas _____

Aurica Jet klausos aparatas

Modelis _____

Atitinka specifikaciją TU 26.60.14-018-81271212-2018

ir yra tinkamas naudoti.

Registracijos numeris. _____

Serijos Nr. _____

QC praėjo.

Naudojimo, siuntimo ir sandėliavimo namuose sąlygos

Klausos aparatą turėtumėte naudoti esant temperatūrai nuo -10 iki $+40$ °C, santykinei oro drėgmei 85%, kai temperatūra 25 °C ir žemesnė (virš rasos taško).

Pristatymo ir sandėliavimo reikalavimai

MD gali būti gabenamas su bet kokių įprastiniu transportu su uždaru korpusu pagal bendrąsias krovininių gabenimo taisykles, galiojančias kiekvienam transporto tipui.

Jūsų klausos aparatai turi būti laikomi temperatūros ir drėgmės diapazone nuo 40 iki 60 °C ir 10–95 % santykinio drėgnumo.



PAKUOTĖS IŠMETIMAS — visos pakuotės sudedamosios dalys (kartonas, plastikas ir kt.) priskiriamos kietosioms atliekoms, todėl jas galima lengvai išmesti perdirbant.

Prieš išmetant, visadapatartina patikrinti, ar galioja atitinkamos šalinimo vietos nuostatos.

PRAŠOME tinkamai išmesti gaminį!



PRODUKTŲ IŠMETIMAS — Klausos aparatas pagamintas iš įvairių medžiagų.

Dauguma jų (plastikiniai, elektros laidai ir kt.) gali būti perduoti perdirbimo aikštelėse ir perdirbti. Tačiau kituose komponentuose (elektroninėse plokštėse ir kt.) gali būti pavojingų medžiagų. Todėl tokius komponentus reikia atiduoti į specialius centrus arba gamintojo atstovui Europoje, kur kvalifikuoti specialistai užtikrins jų utilizavimą.

Prieš išmetant, visadapatartina patikrinti, ar galioja atitinkamos šalinimo vietos nuostatos.

PRAŠOME tinkamai išmesti gaminį!